



Güçlü ve kullanıma hazır

Philips HeartStart FRx Defibrilatör araçları ve aksesuarları

PHILIPS
sense and simplicity

Bu kopyanın baskı kalitesi orijinali gerçek anlamda yansıtmamaktadır.

Taşıma çantaları

HeartStart FRx Defibrilatör bir taşıma çantası ile kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. İki taşıma çantası mevcuttur: standart FRx Taşıma Çantası ve Sert Çanta.



FRx Taşıma Çantası

Parça # 989803139251

Kolay temizlenir üreterandan üretilmiş olan bu çanta çarpma ve düşmelere karşı dayanıklıdır ve VELCRO® kilit sistemi sayesinde açılıp kapanması kolaydır. FRx çanta, isteğe bağlı bir yedek pil, iki ped seti, Bebek/Çocuk Anahtarı ve Hızlı Referans Kılavuzu (989803138601) dâhil olmak üzere FRx Defibrilatörünüzü muhafaza eder ve korur. Kayışlıdır.

Boyutlar:

9.5" (24.1 cm) g, 8.0" (20.3 cm) y,
5.0" (12.7 cm) d



Sert Taşıma Çantası

Parça # YC

Sert plastikten yapılmış olan su geçirmez taşıma çantamız, özellikle ıslak dış ortamlarda daha sert kullanım için uygundur. Ayrıca bir yedek pil, yedek ped kartuşu ve Hızlı Yanıt Kiti içerebilir.

Boyutlar:

13.5" (34 cm) g, 12" (30 cm) y, 6" (15 cm) d

Duvara monte çözümler

Philips Duvara Montaj Konsolu ve Defibrilatör Kabini, kolay erişim ve yanıt için stratejik bir biçimde yerleştirilmesine olanak tanımaktadır.



Duvara Montaj Konsolu

Parça #989803170891

Duvara Montaj Konsolu, Philips "HeartStart" defibrilatörün ve aksesuarlarının muhafaza edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Defibrilatör taşıma çantası, kurcalama önleyici bir "breakaway"XX Emniyet (Secure-Pull) Contası (M3859A) ile Duvara Montaj Konsoluna bağlanabilmektedir. Kopmuş bir conta, Defibrilatörün Duvar Montajından çıkarılmış olduğunu ve yenilenmesi/ıkmal edilmesi gerekebileceğini gösterir. Hızlı Yanıt Kiti (68-PCHAT) Defibrilatör Çantasının arkasında düzgün bir biçimde katlanmaktadır

:

Boyutlar:

10.5" (27 cm) g, 8" (20 cm) y, 6.9" (17 cm) d

Ağırlık: 18.4 ons (0.52 kg)

AED Farkındalık Etiketi

Parça #989803170901 (Kırmızı)

Parça #989803170911 (Yeşil)

Halka açık bir alana yerleştirilmiş her AED'nin üzerine bir AED Farkındalık etiketi koyularak AED farkındalık artırılır. Anlaşılması kolay grafikler, gelip geçenlerin acil bir durumda AED'nin nasıl kullanılacağına ilişkin farkındalığını yükseltir. Ofis ortamları, spor kulüpleri, kamu tesisleri, okullar ve daha birçok yer için son derece uygundur.

Boyutlar

10.25" (26 cm) g, 4.5" (11 cm) y

AED Farkındalık Poster Paketi

Item # 861476 Ops. ABA (İngilizce)

Ops. ABE (İspanyolca)

Ops. ABF (Fransızca)

Bu posterler, AED'lerden uzakta, dinlenme alanlarına, fotokopi odalarına veya soyunma/giyinme odalarına –çalışanların veya halkın birkaç dakika durup AED'ler hakkında bilgi edinebileceği her yere– koyulur. Bu posterler, AED koordinatörünün en yakın AED'nin yerini yazması için bir alan içermektedir. Bir paket dört poster içermektedir.

Boyutlar:

11" (28 cm) g, 17" (43 cm) y



Emniyet Contası

Parça # M3859A



AED Duvar Tabelası

Parça #989803170921 (Kırmızı)

Parça #989803170931 (Yeşil)

Bir Duvara Montaj Konsolunun veya Defibrilatör Kabininin üzerine asılan bir AED Duvar Tabelası defibrilatörün çok daha iyi görülmesini sağlar. Görünürlüğün en üst düzeye çıkarılması için üç farklı şekilde monte edilebilmektedir: T-montaj, V-montaj veya Köşe Montaj.

Yüzey boyutları:

9" (23 cm) y, 6.1" (15 cm) d

Acil medikal yanıtın mobilize edilmesine veya AED hırsızlığının engellenmesine yardım için Philips pil ile çalışan alarmlı üç farklı duvar kabini sunmaktadır. Temel kabin basit bir sesli alarm içermektedir. Ayrıca iki premium kabin mevcuttur: bir duvar yüzeyine monteli kabin ve daha az göze batan bir görünüm için duvarda açılmış bir girintiye sokulan bir yarı gömme kabin.* Premium kabinler sesli ve ışıklı alarm bileşimi içermektedir. Bunlar yüksek kalibreli sağlam çelikten yapılmaktadır ve örneğin oksijen gibi ilave medikal malzemeyi muhafaza edecek büyüklüktedir. Premium kabinler, aynı zamanda, iç güvenlik sistemine bağlanabilmekte ve böylece merkezi olarak daha koordineli bir acil yanıt mobilize edilmektedir.



Temel Yüzeje Montaj Kabin

Parça # 989803136531

Boyutlar:

16.5" (42 cm) g, 15" (38 cm) y, 6" (15 cm) d



Premium Yüzeje Montaj Kabin

Parça # PFE7024D

Boyutlar:

16" (41 cm) g, 22.5" (57 cm) y, 6" (15 cm) d



Premium Yarı Gömme Kabin

Parça # PFE7023D

Boyutlar:

Girintili Bölüm

14" (36 cm) g, 22" (56 cm) y, 6" (15 cm) d

Duvar Ayak İzi

16.5" (42 cm) g, 24.5" (62 cm) y, 2.5" (6 cm) d

* Engelli Amerikalılar Yasası, alt kenarı yerden 27 inçten daha yüksek olmayan nesnelerin açık ara yollarda ve kaldırımlarda ayak trafiği alanlarına 4 inçten daha fazla çıkıntı yapmamasını gerektirmektedir.

İlave aksesuarlar



“SMART Pads II”

Parça # 989803139261


Acil bir durumda yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde kullanılabilen pedlerle değerli zamanın korunmasını sağlar. “SMART Pads II” farklı hasta tipleri için farklı ped setleri satın alma zorunluluğundan kaynaklanan giderleri ortadan kaldırır. Bu önceden bağlı pedler, ilave koruma için bir yarı-sert ped çantası içinde ambalajlanmış ve Philips ALS defibrilatörlere ve bir adaptör vasıtasıyla rakip defibrilatörlere kolay aktarım için “HeartStart”-uyumlu bir fiş ile donatılmıştır. 8 yaşından küçük veya 25 kg’dan hafif hastalarda, eğer varsa, Bebek/Çocuk Anahtarı kullanılmalıdır.



Bebek/Çocuk Anahtarı

Parça # 989803139311

Özgün Bebek/Çocuk Anahtarı, yalnızca, 8 yaşından küçük veya 25 kg’dan hafif hastaların tedavisinde FRx Defibrilatör ile kullanılır. Bebek/Çocuk Anahtarı takıldıktan sonra, FRx defibrilasyon enerjisini otomatik olarak azaltmakta ve sesli ve görsel yönlendirme ve bebeklerin/çocukların tedavisi için özel olarak oluşturulmuş CPR koçluğu sağlamaktadır.

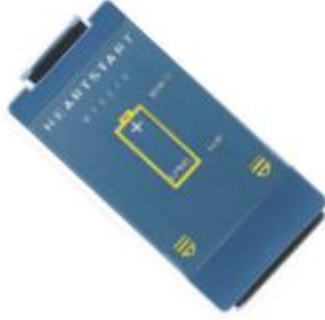

Uzun-Ömürlü Pil

Parça # M5070A

FRx Defibrilatörde kullanıldıktan sonra atılabilen, raf ömrü beş yıl ve ayrıca (tipik olarak) dört yıl kullanım süresi yüklü lityum mangan dioksit uzun ömürlü pil kullanılmaktadır. Defrilatör ile birlikte bir yedek pil saklanmalıdır. Eğitim ve/veya gösterim için kullanılan defibrilatörlerde ilave pil satın alınmalıdır.

Uçak Pili, FRx Defibrilatör

Parça # 989803139301 (Yalnızca ABD)

Uçak Pili dört yıl ömürlü pil spesifikasyonlarını karşılamaktadır ve uçaklarda kullanım için FAA TSO C-142 mevzuatına uygundur.

“HeartStart” adaptörleri

“Smart Pads II”, Philips “HeartStart” Adaptörü ile donatıldığında diğer üreticilerin defibrilatörleri ile de kullanılabilir.



Çıkarılabilir konfigürasyon

Adaptör Model 05-10200

“Hewlett-Packard CodeMaster 100”, XE, XL ve XL+; Philips Heartstream/HeartStart XL ve XLT; “HeartStart MRx” ve Laerdal HeartStart 4000 defibrilatörlere/monitörlere bağlantı için el kullanımı gerektirmeyen Philips M3507A veya M1750A/B kablolar ile uyumludur



Hızlı Yanıt Kiti

Parça # 68-PCHAT

Hızlı Yanıt Kiti hasta bakımı ve kişisel koruma için tipik olarak gereksinilen gereçleri ve malzemeleri içermektedir: iki çift hipoalerjenik nitril eldiven, bir cep solunum maskesi, paramedik makası, bir göğüs tıraş bıçağı ve bir büyük ekstra emici kağıt havlu. Bu parçalar, FRx taşıma çantasının sapına güvenli bir biçimde takılmış olan bir fermuarlı torba içinde muhafaza edilmektedir.

Boyutlar:

9.5” (24 cm) g, 5.5” (14 cm) y



Adaptör Model 05-10000

“Medtronic Physio-Control Quik-Combo LifePak 9”, 10C, 11, 12, 20 ve 500 defibrilatörler için çıkarılabilir adaptör.



Adaptör Model 05-10100

Zoll 1200, 1400, 1600 ve M-Seri defibrilatörler için çıkarılabilir adaptör.

Eğitim araçları



Eğitim Pedleri II

Parça # 989803139271

Eğitim Pedleri II, "HeartStart FRx" veya "HeartStart FRx Trainer" ile birlikte, bir dış manken adaptörü (M5089A) ile bağlanmış bir manken üzerinde veya bir ped yerleştirme kılavuzu (yetişkinler için M5090A; bebekler ve çocuklar için 989803139281) kullanılabilir. "HeartStart FRx" Defibrilatör üzerinde eğitimde, FRx'in eğitim modunun etkinleştirilmesi için Eğitim Pedleri II'nin takılması ve defibrilatörün şok oluşturma özelliğinin durdurulması yeterlidir.

Kullanıcı eskiz farklı eğitim senaryosu uygulayabilir. Ayrıca, yetişkin ve bebek/çocuk* resüsitasyonu için tek eğitim pedi kullanılabilir. Defibrilatörün, CPR koçluğu dâhil olmak üzere, sesli yönlendirmesi, temsili kurbanın tedavisi için yeterlidir.

Her eğitim pedi çantası, entegre kablolu veya konektörlü bir çift tekrar kullanılabilir yapışkan ped içerir. Bu çanta bir yetişkin ped yerleştirme kılavuzu ve resimli ped kullanım kılavuzu ve kullanma talimatı ile birlikte ambalajlanmıştır. Ayrıca, bir ped/kablo/fiş takımından oluşan yedek Eğitim Pedleri II (989803139291) de mevcuttur. Buna ek olarak, bir bebek/çocuk pedi yerleştirme kılavuzu da (989803139281) bulunmaktadır.



"HeartStart FRx Trainer"

Parça # 861306

"HeartStart FRx" Defibrilatörün bu eğitim sürümü Eğitici, Eğitim Pedleri II, Taşıma Çantası, Kullanma Talimatı, Hızlı Referans ve bir dış manken adaptörü içermektedir. Bu ürün bir dış manken adaptörü (M5088A) veya bir dış manken adaptörü (M5089A) ile donatılmış bir manken üzerinde kullanılabilir.

Eğitmen Eğitim Araç Kiti

Parça # 989803139321

Yalnızca DVD Parça # 989803139341

Eğitim Araç Kiti, "HeartStart FRx" Defibrilatörün çalıştırılması için gruplara yönelik eğitsel destek ve sunum sağlayan bir DVD ve bir CD içermektedir. Ayrıca, araç kitinden ayrı olarak, bir DVD eğitim diskini satın alınabilir.



Bebek/Çocuk Anahtarı

Parça # 989803139311

Bebek/Çocuk Kilidi, "HeartStart FRx Trainer" ile veya Eğitim Pedleri II monte edilmiş olan "HeartStart FRx AED" ile eğitim sırasında bebek/çocuk tedavisinin temsilinde kullanılabilir.

* Bir bebekte veya çocukta eğitimin kolaylaştırılması için Bebek/Çocuk Anahtarı (989803139311) takılmalıdır.

Veri yönetimi

Philips, HeartStart Defibrilatörlerin verimli ve etkin bir biçimde kullanımına ve resüsitasyon verilerinin yüklenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına, analiz edilmesine ve raporlanmasına destek olmak üzere çeşitli araçlar sağlamakta ve böylece, medikal direktör ile birlikte kardiyak acil durumlara alınan yanıtların hassas bir biçimde ayarlanmasına yardımcı olmaktadır. İster bir halk erişim programının yönetiminde, isterse bir okul AED programında, bir kurumsal acil yanıt ekibinde, bir EMS sisteminde ya da hastane resüsitasyon kurulunda olsun "Event Review" yazılımı defibrilatör verilerinin yönetimi için gerekli araçlara sahiptir

"HeartStart Review Express"

Defibrilatör verilerine hızlı bakışta en yalın veri yönetimi ürünümüz olan "Review Express", defibrilatörden EKG'nin indirilmesine, görüntülenmesine ve yazdırılmasına olanak tanımaktadır. Bu program Philips veri yönetimi web sayfasından

www.medical.philips.com/goto/eventreview

ücretsiz olarak indirilebilmektedir. Eğer dipnotlu olguların saklanması gerekiyorsa, Event Review ailesindeki şu yazılımlardan biri önerilmektedir: "Data Messenger", "Event Review" veya "Event Review Pro".

"Data Messenge"

Parça # PN 861451 Ops AOI

"HeartStart Data Messenger", defibrilatör çantalarının gerekli oldukları yere götürülmesine yardımcı olmaktadır. Defibrilatör olgularını kendi AED'lerinden yüklemek ve Event Review veya Event Review Pro yardımıyla geriye dönük olarak değerlendirilmek üzere merkezi bir veri yöneticisine veya medikal direktöre iletmek isteyen itfaiye ve EMS organizasyonları için idealdir. Bu ürün, arka planda, otomatik çalışacak şekilde düzenlenebilmektedir. Alternatif olarak, olguların indirilmesinde, görüntülenmesinde ve iletilmesinde adım adım yol gösteren kolay kullanımlı bir sihirbaz şeklinde de düzenlenebilmektedir. Bir PC veya akıllı telefon ile çalışır.

"Event Review"

Parça # M3834A (tek PC)

veya 989803141811 (kuruluş genelinde)

"Event Review" hasta verilerinin defibrilatörden yüklenmesine ve PC ekranında görüntülenmesine, yorum yazılmasına ve temel yanıt ve hasta durumu bilgisi eklenmesine olanak tanımaktadır. Olgu bir klasöre veya bir veri tabanına kaydedilebilmekte ve böylece

plansız olgu sorgusu ve olgu raporlama yapılmasına olanak tanımaktadır. FRx veya HS1, aynı zamanda, "Event Review" ile birlikte düzenlenebilmektedir.* Bu ürün tek PC fiyatı veya sınırsız genel organizasyon fiyatı ile mevcuttur.



"Event Review Pro"

Parça # 861431 Opsiyon A01 . Tek PC

Parça # 861431 Opsiyon A03 – Merkez lisansı "Event Review Pro", en titiz veri yöneticiler ve medikal direktörler için Philips'in, ayrıntılı yanıt süreleri, müdahaleler ve hasta gözlemleri dahil olmak üzere yanıtın tüm boyutlarının kaydedilmesi için daha ayrıntılı veri giriş ekranları içeren kapsamlı olgu yönetimi aracıdır. Bireysel olgu raporlarına ek olarak, sistem genel yanıtının Utstein raporu ve grafik özeti elde edilmekte ve böylece hizmet düzeyleri daha verimli bir biçimde yönetilmektedir.

Kızılötesi Veri Kablosu

Parça # ACT-1R

"HeartStart Review Express", "Review Express Connect", "Event Review" veya "Event Review Pro" çalıştıran bir PC'ye bağlanan Kızılötesi Veri Kablosu hasta verilerinin, kalıcı saklama ve yanı sıra görüntüleme ve raporlama amacıyla FRx defibrilatörden çekilmesine olanak tanımaktadır.



"HeartStart" Yapılandırma

Parça #989803143041

"HeartStart" Yapılandırma, "Pocket PC" kullanılarak, FRx veya HS1 konfigürasyonunun değerlendirilmesine ve değiştirilmesine olanak tanımaktadır. Defibrilatörün mevcut yapılandırması geri alınabilmektedir, bu yapılandırma varsayılan değerlere göre yeniden kurulabilmekte veya medikal direktörün tercihleri doğrultusunda bireysel ayarlar yeniden gözden geçirilebilmekte ve bu ayarlar defibrilatöre aktarılabilir. Defibrilatör programı için yapılandırmanın daha verimli bir biçimde yönetilmesi için, değerler akıllı telefonda bir klasöre kaydedilebilmektedir. Bu, aynı yapılandırmanın tüm AED'lere aktarılmasına ve yanı sıra, izin verilen ayarların kaydedilmesine olanak tanımaktadır.

Not: Bu ürün ile EKG görüntüleme yalnızca temel ritim belirleme amaçlıdır ve taniya ya da ST segment yorumlamaya yönelik değildir. EKG görüntüleme yüksek çözünürlüklü bir el ekranı ve 5.0 veya daha sonraki sürüm Palm OS® gerektirmektedir.

* Varsayılan değer değişiklikleri yalnızca yetkili personel tarafından ve bir medikal profesyonelin gözetimi altında yapılmalıdır. Bu ürün reçete ile satılmaktadır.

HeartStart AED Hizmetleri*

Philips, AED programlarının gereksinimlerini destekleme amaçlı araçlara ve kaynaklar için yönetim hizmeti sağlamaktadır. Gereksinim ne olursa olsun, her durum için doğru hizmetin bulunması için müşterileri ile ortak çalışmaktadır. Aşağıdakiler dahil olmak üzere, önemli AED bileşenlerinin kusursuz yönetiminde yardımcı olmaktadır:

- SMART Track "online" program yönetimi
- Medikal yönlendirme
- Eğitim
- Bakım
- Mevzuat desteği
- Olay sonrası destek
- Müşteri hizmeti



Philips, küresel olarak tek merkezde veya çoklu merkezde başarılı bir AED programının uygulanmasına yardımcı.

* Mevcut olduğunda HeartStart FRx reçete gerektirmektedir.